

Miele

Megoldások a fogorvosi rendelőkben

Miele Professional. Immer Besser.



360°-os megoldásaink fogorvosi rendelője számára

Minőség minden szinten

Profitáljon átfogóan kigondolt rendszermegoldásunkból rendelője minden szintjén. A négy szintű System4Dent komplett megoldásunk nagy teljesítményű fogorvosi rendszerünk használatával nemcsak a műszerek körforgását optimalizálja, hanem időt és pénzt is megtakarít. A Miele Professional a textílapolás és a mosogatás területén is hatékony megoldást nyújt a háztartási- és pihenőhelyiségekben.



Tartalomjegyzék
Az optimális együttműködéshez..... 4

PG 8581 „A mindenttudó” és
PG 8591 „Az exkluzív”
Termékjellemzők..... 7
Készülékek áttekintése 8

Termikus fertőtlenítők komponensei
Termékjellemzők..... 11
Komponensek a PG 8581, PG 8591 számára
20
Átfogó komponensek 24

Folyamatdokumentáció
Komponensek 27

Textílapolás
Mosógép
Textílapolás munkaruházat esetén 31

Mosogatás
Mosogatógépek
Termékjellemzők..... 32

Szerviz 33

Az optimális együttműködéshez

System4Dent

Minden egy kézből

A napi munkához kifejlesztve:
A műszerek professzionális előkészítését szolgáló új System4Dent gyenge pontok nélkül teljesíti a műszerek körforgása során fellépő legkeményebb igényeket is.

• Tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás

Innovatív termikus fertőtlenítők egyedileg választható felszerelésekkel. Nagy teljesítményű kis sterilizátorok a műszerek gyors és biztonságos előkészítéséhez.

• Technológiai vegyszerek


Testre szabott technológiai vegyszerek a műszerek alapos és kíméletes tisztításához

• Folyamatdokumentáció

A folyamatok mindenkor utólagos nyomonkövethetőségét intelligens dokumentációs szoftver biztosítja

• Szerviz

Maximális Miele minőség a tanácsadás, finanszírozás, szerviz és validálás terén is

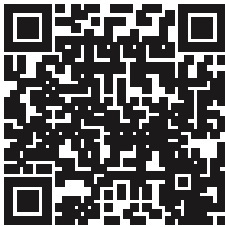

További hasznos információk
Honlapunkon (www.miele-professional.hu) a letölthető linkeket és egy szemléletes magyarázó videót talál.

Bizalom a Miele márkában

Egy Miele Professional termék választásával ön a kiváló minőség és teljesítmény mellett dönt. A professzionális felhasználóktól elnyert bizalmat azok a kiváló minőségű készülékek alapozzák meg, melyek minden nap megbízhatóan megfelelnek minden várakozásnak: összes ügyfelünk 97%-a legközelebb is Miele Professional készüléket választana.

Vezető műszergyártók ajánlják a Miele márkát


A Miele Professional az eszköz biztonságos és higiénikus, kifogástalan előkészítését jelenti az anyag egyidejű legmagasabb védelme és értékének megőrzése mellett. Ezért javasolják a vezető műszergyártók műszereik Miele rendszerekkel való előkészítését.



A legmagasabb igényekhez

Bevált tisztítási program Vario TD Dental

A Miele által fejlesztett Vario TD Dental programban az előtisztítás alacsony hőmérsékleten zajlik, hogy a vérmaradványok ne denaturálódjanak. Az intenzív fő tisztítási fázist követően a termikus fertőtlenítés következik 90 °C feletti hőmérsékleten és 5 perces tartási idővel. A sebészeti műszerek optimális kímélése érdekében a végső öblítés teljesen sómentesített vízzel történik öblítőszer nélkül. A program az összes hőstabil műszer esetén alkalmas a DIN EN ISO 15883 szerinti rutinszerű előkészítéshez. Az eljárás különösen anyagkímélő és kézi műszerek előkészítéséhez is javasolt. A PG 8591 termikus fertőtlenítőben a forró-levegős szárítás gondoskodik a műszerek befejező, alapos szárításáról.

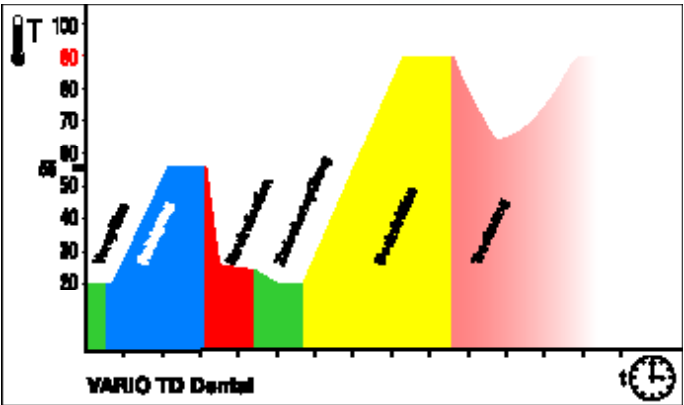

VARIOTD

*A független „Mercuri International” intézet által végzett felmérés alapján


Higiéniás helyiség

Példák a termikus fertőtlenítők és a sterilizátorok beépítésére



Helyiség mérete: kb. 250 x 250 cm (hosszúság x szélesség)

Higiéniás helyiség L-alakú munkapulttal
Az L-alakú higiéniai helyiség nagyobb mozgásszabadságot és tárolóhelyet biztosít. Az öblítőt és a termikus fertőtlenítőt tartalmazó piszkos oldal az L-alakú építési mód révén még jobban elkülönül a tiszta oldalon lévő kis sterilizátortól, dokumentációtól és címkenyomatatótól.

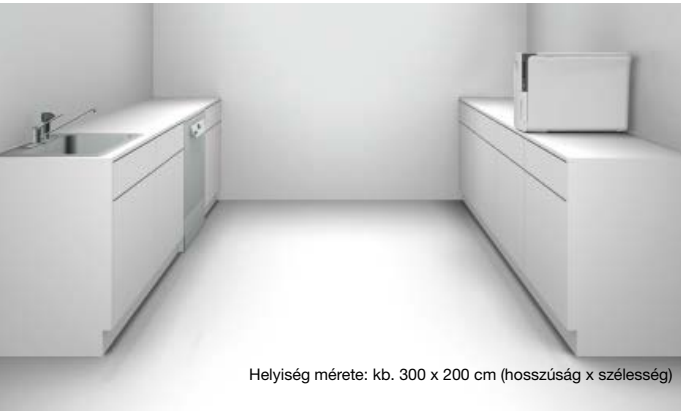

Helyiség mérete: kb. 300 x 200 cm (hosszúság x szélesség)

Higiéniás helyiség 2 elszeparált munkapulttal
Optimális megoldás pl. nagy területű vagy több kezelővel dolgozó rendelőkben. Az öblítőt és a termikus fertőtlenítőt tartalmazó piszkos oldal térben el van választva a tiszta oldalon lévő sterilizátortól, dokumentációtól és címkenyomatatótól. Az eszköz- és tárolószekrények mindkét oldalon elegendő helyet biztosítanak a munkafelületen, és csökkentik a hanyagság miatti fertőzés kockázatát.



Helyiség mérete: kb. 300 x 150 cm (hosszúság x szélesség)

Higiéniás helyiség egybefüggő munkapulttal
Ebben az elrendezésben az előkészítés az egybefüggő munkapult mentén történik. A piszkos oldalhoz tartozik az öblítő és a termikus fertőtlenítő. A tisztítószerek a készülék típusától függően az alsó mosószekrényben, a beépített tartályban, a készülék talpzatában vagy a Miele adagolószekrényben található. A kissterilizátort, folyamatdokumentációt és a sterilizálós-címkek nyomtatására szolgáló nyomtatót az üveglappal elválasztott tiszta oldal tartalmazza.

PG 8581, PG 8591 termikus fertőtlenítők

A Miele kifizetődő előnyei



Nagyobb teljesítmény
A Miele termikus fertőtlenítők kitűnő tisztítási teljesítményükkel tűnnek ki magas vízátfolyás képességükkel.

- Az innovatív fűtőszivattyú hozzáigazítja a szivattyúnyomást a mindenkori programlépéshez, ezáltal optimális mosogatási eredményt tesz lehetővé.
- Kapacitás: 44 üres eszköz és műszerkészlet akár 160 beteg számára

* Tükrökből, szondából és csipeszből álló műszerkészlet




Nagyobb biztonság
Az új generáció az előkészítés során a higiénia és a biztonság legmagasabb szintjét jelenti.

- A többkomponensű szűrőrendszer rendkívül hatékonyan távolítja el a szennyeződések részecskéit a mosóvízből
- A lézertechnológiával, fűtőtestet nem tartalmazó, hézagmentesen hegesztett mosogatótérnek köszönhetően egyáltalán nem kell szennyeződéslerakódással számolni



Nagyobb kényelem
A felhasználó számára számos kényelmi jellemző könnyíti meg a munkafolyamatokat.

- A szabadalmaztatott sőtartály könnyen hozzáférhető módon van elhelyezve az ajtóban.
- AutoClose: elég, ha az ajtó és a készülék csak enyhén érintkezik, és az ajtó automatikusan becsukódik.
- „CleanSteel érintő“
Kezelés: a kezelőpult általános nemesacél felületből áll.

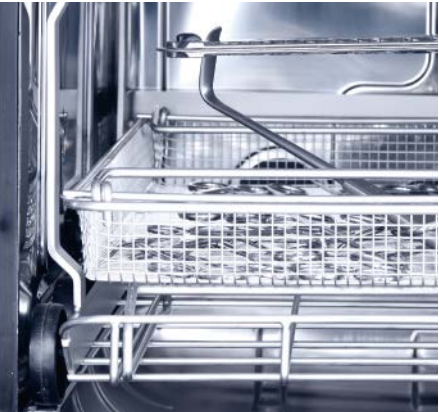

Biztonság ellenőrzés révén
A termikus fertőtlenítők öblítési nyomás- és mosogatókar-felügyelettel, valamint típusától függően vezetékeképesség-felügyelettel vannak felszerelve. Ez a csúcstechnológiájú szenzorika számottevően hozzájárul az előkészítés megbízhatóságához.

- A készülék érzékelőinek köszönhetően azonnal jelenthetők a szükséges programparaméterektől való eltérések, és a felhasználó idejekorán megkezdheti a hibaelhárítást



Hatékony szárítás

- EcoDry: a program befejeztével a PG 8581 ajtaja az AutoOpen funkciónak köszönhetően automatikusan kinyílik. Így módon a maradék nedvesség távozik a mosogatótérből, és ennek eredményeképpen a mosogatnivaló gyorsabban szárad.
- DryPlus: a PG 8591 aktív forrólevegős szárítása HEPA H13 szűrővel optimális megoldás üres eszközök esetében



Tesztelt Miele minőség
A mindennapi munka magas kihívásai megbízható termékeket igényelnek. Ezért a Miele laborban az összes Miele termikus fertőtlenítőt behatóan teszteljük és optimalizáljuk. A Miele alkalmazástechnikában szerzett sok évnyi tapasztalata számottevően az értékelésben összpontosul, így valamennyi készülék megfelel a Miele magas minőségi követelményeinek, mely a biztonságos előkészítési eredményhez maximális tisztítási teljesítményt nyújt tartósan magas öblítési nyomás mellett.

Készülékek áttekintése

Felszereltség, programok, futási idő



Karbantartás: 2 évente vagy legkésőbb 1000 üzemóra után.

Termikus fertőtlenítők	PG 8581	PG 8591
Beépítési szélesség [mm]	600	600
Magasság, mélység [mm]	H 835 (820*), T 600	H 835 (820*), T 600
Futási idő/Vario TD** [perc]	42	40
Kézi műszerek [kapacitás]	44	44
Nyálelszívó [kapacitás]	44	44
Száritás	EcoDry	DryPlus
Elektromos csatlakozás	Háromfázisú váltóáram***	Háromfázisú váltóáram***
Külső burkolat, választható		
Fehér ház, fém (AW)	•	•
Nemesacél (AE)	•	•
Vezérlés/programok		
Programok	6	7
TouchControl/6 program + 2 szabad programhely	•	•
AutoClose – automatikus ajtóreteszelés	•	•
Hangjelzés a program végén	•	•
Ethernet modul/RS232 modul/DataDiary a folyamatdokumentációhoz	Opció	Opció
Vízcsatlakozások		
1x hideg víz, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1x hideg víz a gőzkondenzátor számára, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1x teljesen sómentesített víz, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1/2" átmérőjű vízbevezető tömlők száma 3/4", külső menetes csatlakozóval, hossz. kb. 2,0 m	3	4
Lefolyótömlő Ø 22, szivattyúzási magasság: max. 100 cm	•	•
Waterproof-rendszer (WPS)	•	•
Keringetőszivattyú teljesítménye [kW]	0,8	0,8
Adagolóegységek/DOS K 85 flex csatlakoztatási lehetőségek	-	1
Vízlágyító	•	•
Gőzkondenzátor	•	•

Termikus fertőtlenítő

PG 8581 és PG 8591

Termikus fertőtlenítő	PG 8581	PG 8591
Aláépített/szabadon álló készülék fedéllel	•	•
Keringetőszivattyú, [Qmax. l/perc]	500	500
Vezérlés/programok		
Programok	6	7
TouchControl/6 program* + 2 szabad programhely	•	•
AutoClose – automatikus ajtóreteszelés	•	•
Hangjelzés a program végén	•	•
Ethernet modul/RS232 modul/DataDiary a folyamatdokumentációhoz	Opció	Opció
Vízcsatlakozások		
1x hideg víz, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1x hideg víz a gőzkondenzátor számára, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1x teljesen sómentesített víz, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	•	•
1x meleg víz, 2,0–10 bar áramlási nyomás (200–1000 kPa) (EN 1717 szerint visszaszívásbiztos)	–	•
1/2" átmérőjű vízbevezető tömlők száma 3/4", külső menetes csatlakozóval, hossz. = kb. 2,0 m	3	4
Űritőszivattyú Ø 22, szivattyúzási magasság: max. 100 cm	•	•
Waterproof-rendszer (WPS)	•	•
Elektromos csatlakozás		
3 N AC 400 V 50 Hz átépíthető a következőre: AC 230 V 50 Hz, csatlakozókábel kb. 2,0 m, 5 x 2,5 mm² CEE-csatlakozóval együtt	•	•
Fűtés [kW]	8,5	8,5
Keringetőszivattyú [kW]	0,8	0,8
Teljes teljesítményigény [kW]	9,3	9,3
Biztosíték [A]	3 x 16	3 x 16
Adagolóegységek		
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•	•
1 adagolószivattyú folyékony tisztítószerhez (szívólándzsa hosszúsága: 217 mm)	•	•
1 adagolószivattyú semlegesítőszerhez (szívólándzsa hosszúsága: 217 mm)	•	–
Csatlakozási lehetőségek		
DOS K 85 flex ill. DOS K 85/1 flex folyékony közegekhez	–	1
Vízlágyító		
Hideg- és melegvízhez 65 °C-ig	•	•
Gőzkondenzátor		
Aggregát	•	•
Száritó aggregát/radiális ventilátor		
Ventilátor [kW]	–	0,3
Fűtőtekercs [kW]	–	2,2
Teljes teljesítményigény [kW]	–	2,5
Légteljesítmény [m3/h]	–	47
Hőmérséklet-beállítás 1 °C-os lépésekben [°C]	–	50–115
Időbeállítás 1 perces lépésekben [perc]	–	0–120
Durva szűrő/Hepa szűrő/leválasztási fok (DIN EN 1822)/élettartam	–	H 13/> 99,95%/200 ó
Méret és súly		
Külső méretek (fedél nélkül mag. 820 mm). [mm]	835/600/600	835/600/600
Mosogatótér mérete: ma./sz./mé. [mm]	522/536/fent = 518, lent = 523	522/536/fent = 518, lent = 523
Tömeg [kg]	74	78
Külső burkolat, választható		
Fehér ház, fém (AW)	•	•
Nemesacél (AE)	•	•
Szabványoknak való megfelelés		
DIN EN ISO 15883–1/2/6, EN 61010–2–040, EN 61326 –1	•	•
Minősítések és jelölések		
IP 21	•	•
CE 0297	•	•

* fedél nélkül (a szállítási csomag tartalmazza a fedelet)
** Tisztítás és term. fertőtlenítés
*** Egyfázisú, opcionális

Futási idők és fogyasztások

PG 8581	Tisztítás/fertőtlenítés					Szárítás	
	Programidő	KW	WW	AD	Energia	Programidő	Energia
	perc	l	l	l	kWh	perc	kWh
Vario TD Dental	42	37,1	–	9,0	2,5	7	–
Vario TD Dental +	56	49,5	–	13,0	3,1	5	–
VarioTD Intensiv	94	15	–	74,0	3,7	8	–
Special 93 °C-10 perc	56	41,5	–	14,0	3,8	3	–
Öblítés	4	10,0	–	–	0,01	–	–

PG 8591	Tisztítás/fertőtlenítés					Szárítás	
	Programidő	KW	WW	AD	Energia	Programidő	Energia
	perc	l	l	l	kWh	perc	kWh
Vario TD Dental	40	18,6	18,5	9,0	2,2	34*	0,9
Vario TD Dental +	54	22,8	26,7	13,0	2,7	52	0,9
VarioTD Intensiv	94	15,0	–	74,0	3,7	51	1,0
Special 93 °C-10 perc	52	11,9	29,6	14,0	3,3	79	1,4
Öblítés	4	10,0	–	–	0,01	–	–
Szárítás	–	–	–	–	–	40	0,7

Változat áttekintése

Készülék	Felszereltség	Anyagszám
PG 8581 AW AD LD LAN	Külső burkolat, fehér, 2 beépített adagolószivattyú, Ethernet modul, LAN, EcoDry	10121160
PG 8581 AE AD LD LAN	Külső burkolat, nemesacél, 2 beépített adagolószivattyú, Ethernet modul, LAN, EcoDry	10121170
PG 8581 AW AD LD WLAN	Külső burkolat, fehér, 2 beépített adagolószivattyú, DataDiary, Wi-Fi, EcoDry	10880060
PG 8581 AE AD LD WLAN	Külső burkolat, nemesacél, 2 beépített adagolószivattyú, DataDiary, Wi-Fi, EcoDry	10880080
PG 8591 AW WW AD LAN DOS	Külső burkolat, fehér, 1 beépített adagolószivattyú, meleg víz csatlakozás 1 külső adagolómodul, Ethernet modul, LAN, DryPlus	10121180
PG 8591 AE WW AD LAN DOS	Külső burkolat, nemesacél, 1 beépített adagolószivattyú, meleg víz csatlakozás 1 külső adagolómodul, Ethernet modul, LAN, DryPlus	10121190
PG 8591 AW WW AD WLAN DOS	Külső burkolat, fehér, 1 beépített adagolószivattyú, meleg víz csatlakozás 1 külső adagolómodul, DataDiary, Wi-Fi, DryPlus	10880100
PG 8591 AE WW AD WLAN DOS	Külső burkolat, nemesacél, 1 beépített adagolószivattyú, meleg víz csatlakozás, 1 külső adagolómodul, DataDiary, Wi-Fi, DryPlus	10880120
Komponensek		
DE-CS6-85	Nemesacél fedél a PG 8581/91 + PG 8595/96 számára, 90 cm széles Elhelyezéshez balra a készülék mellett.	10101450
Fedőlemez/munkalapvédelem 60 cm, lesarkítva szögletes munkafelületekhez		4028800
Fedőlemez/munkalapvédelem 60 cm, kettőzött lekerekített munkafelületekhez		1156154
ADB	Fedőlemez (fedél nélküli készülék beépítésénél szükséges)	09715590

Fogászati komponensek a műszerek termikus fertőtlenítőkben történő biztonságos előkészítéséhez

A Miele kifizetődő előnyei



Széles termékportfólió

Minden egyes műszerhez hozzáillő előkészítési megoldást kínálunk – igény szerint adapterként, betétként vagy injektorként.



Innovatív megoldások

A felhasználókkal való folyamatos tapasztalatcserének köszönhetően a rendelőhöz illő megoldásokat érünk el, amelyek rugalmasan összeállíthatók az egyes szakterületek számára.



Nagy kapacitás

A PG 85xx sorozat készülékeiben a különböző adapterekkel és betétekkel akár 44 üreges eszközt készíthet elő hozzászámítva a tűkörből, szondából és csipeszből álló műszerkészleteket akár 160 beteg számára.



Rugalmasan használható

A moduláris felszerelési lehetőségeknek köszönhetően a töltet egyedi összeállítása a műszerek gyártási mennyisége által biztosított.



Megnyugtató biztonság

A megbízható előkészítési folyamat sokéves alkalmazástechnikai tapasztalaton és jogilag biztonságos dokumentáción alapul.




Kitűnő gazdaságosság

Termékeinket a tartósság, kiváló minőség és a pótalkatrészek garantált szállíthatósága jellemzi.

Komponensek minden követelményhez – felhasználási példák

Általános fogászat

Töltet példa az üreges és tömör műszerek előkészítéséhez

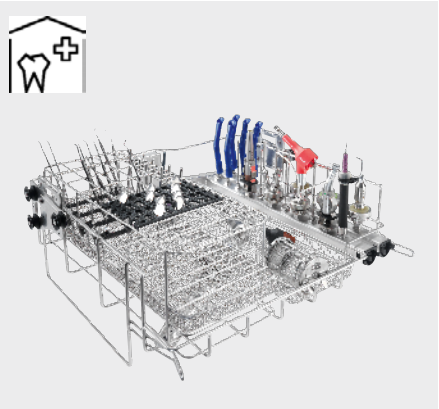

- A 105/1 felső kosár**
- A 836 fogászati fúvóka készlet, A 800 szűrőcső és A 804 tisztítókefe
 - A 803 befogók kézi műszerekhez és/vagy AUF 1 ADS 1/2/3 és A 801 adapterrel
 - A 865 adapter 3F/MF-fecskendőkhöz
 - A 813/1 adapter kézi műszerekhez külső permetező csatornával
 - A 814/1 befogó fecskendők számára
 - A 819 öblítőhüvely üreges eszközök számára, például magnetostriktív fogorvosi UH eszközökhöz
 - E 337/1 betét álló műszerekhez A 830 betéttel szájtükhöz
 - E 430/1 betét 1/3 szitatálcahoz
 - E 473/2 betét kis eszközökhöz



- A 151 alsó kosár**
- E 315 injektorléc/a nélkül 22 injektorhelyekkel
 - E 430 szitatálca
 - E 198/1 betét szitatálcahoz
 - E 197 szitatálcával

Implantológia és MKG

Töltet példa az akár 18-as méretű tálcák és 22-es üreges eszközök előkészítéséhez




- A 105/1 felső kosár**
- A 836 fogászati fúvóka készlet, A 800 szűrőcső és A 804 tisztítókefe
 - 1 x E 523 betét szitatálcahoz




- A 151 alsó kosár**
- 2 x A 317 betét szitatálcahoz

Fogszaályozás

Töltet példa a műszerek, fogók és lenyomatkanalak előkészítéséhez

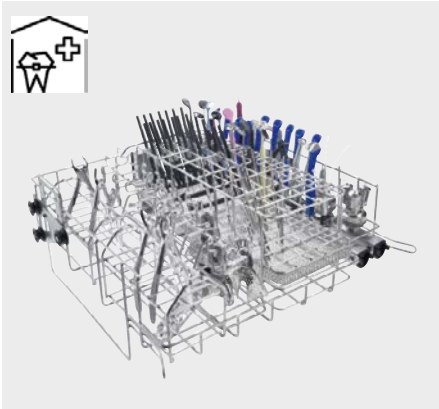

- A 105/1 felső kosár**
- A 836 fogászati fúvóka készlet, A 800 szűrőcső és A 804 tisztítókefe
 - A 803 adapter H&W/turbinák számára és/vagy AUF 1 ADS 1/2/3 és A 801 adapterrel
 - A 865 adapter 3F/MF-fecskendőkhöz
 - A 814/1 befogó fecskendők számára
 - E 337/1 betét álló műszerekhez
 - A 830 betéttel szájtükhöz
 - 2 x E 521/2 betét fogókhoz
 - 2 x E 522/1 betét lenyomatkanalakhoz

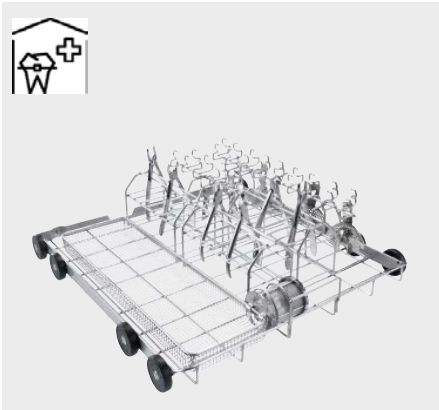

- A 151 alsó kosár**
- E 315 injektorléc 22 injektorhelyekkel
 - E 430 szitatálca
 - 2 x E 521/2 betét fogókhoz
 - 2 x E 522/1 betét lenyomatkanalakhoz
 - E 473/2

Fogászati komponensek áttekintése termikus fertőtlenítőkhöz

Kedvezményes csomagok a PG 8581 és a PG 8591 számára



Kedvezményes csomagok nyelek és könyökdarabok előkészítéséhez								
A 105/1 22. oldal	A 151 22. oldal	A 800 22. oldal	A 804 22. oldal	A 803 22. oldal	A 836 22. oldal	E 337/1 22. oldal	E 430/1 betét 22. oldal	E 473/2 22. oldal

Kedvezményes csomagok nyelek és könyökdarabok előkészítése nélkül					
A 105/1 22. oldal	A 151 22. oldal	A 836 22. oldal	E 337/1 22. oldal	E 430/1 22. oldal	E 473/2 22. oldal

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára



Kosarak és kosárkomponensek							
A 105/1 23. oldal	A 102 23. oldal	A 151 23. oldal	A 800 23. oldal	A 804 23. oldal	A 836 23. oldal	UBS 3 23. oldal	A 315 23. oldal

Befogók, adapterek			Fúvókák		
A 803 24. oldal	A 812 24. oldal	A 819 26. oldal	E 336 26. oldal	A 817 26. oldal	A 865 24. oldal

További fúvókák
lásd: 19. oldal

Fogászati komponensek áttekintése termikus fertőtlenítőkhöz

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára



Befogók és szűrők			
A 801 25. oldal	AUF 25. oldal	FP szűrőlemezek 25. oldal	ADS 25. oldal

Betétek különböző műszerekhez									
E 337/1 20. oldal	A 830 és A 830/1 20. oldal	E 198/1 20. oldal	E 131/1 20. oldal	E 468 20. oldal	E 130 21. oldal	E 339/1 21. oldal	E 806/1 21. oldal	E 523 21. oldal	A 317 21. oldal

E 476 20. oldal	E 363 20. oldal	E 379 21. oldal	E 378 21. oldal	E 441/1 22. oldal	E 147/1 22. oldal	E 520 22. oldal	E 430/1 22. oldal

Komponensek adagolás számára			Aláépítmények	
PG 8596 23. oldal	DOS K 85/1 flex 23. oldal	DOS K 85 flex 23. oldal	UG 31- 60/60-85 23. oldal	UG 31- 90/60-85 23. oldal

További komponensek, lásd: 31. oldal

Komponensek az összes Miele termikus fertőtlenítőhöz



Betétek különböző műszerekhez											
E 197 betét 24. oldal	E 521/2 24. oldal	E 522/1 24. oldal	E 491 24. oldal	E 473/2 24. oldal	E 807 24. oldal	E 801/1 24. oldal	E 143 24. oldal	E 802/1 24. oldal	A 813/1 25. oldal	A 814/1 25. oldal	A 815 25. oldal


Teljesen sómentesített vízzel való előkészítéshez			
PG 8595 26. oldal	VE P 2800 26. oldal	VE P 2000 26. oldal	ConductivityMeter 26. oldal

Kedvezményes fogászati csomagok a PG 8581 és a PG 8591 számára

Dent 1 kedvezményes csomag szett – nyelek és könyökdarabok előkészítésével



A 105/1 felső kosár/
injektor

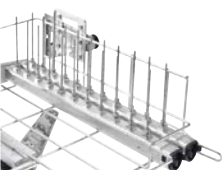

A 836 fogászati fúvóka
készlet



A 151 alsó kosár/fiók



A 800 szűrőcső



A 804 tisztítókefe



A 803 befogó
kézi műszerekhez



E 430/1 betét
1/3 szitatálcához




E 473/2
betét




E 337/1 betét
álló műszerekhez

Komponensek	Leírás	Anyagszám
Kedvezményes csomag	PG 8581 és PG 8591	10129190
részei:		
A 105/1	Felső kosár/injektor	(10777260)
A 151	Alsó kosár/fiók	(9862410)
E 473/2	Betét	(10623720)
E 430/1	Betét 1/3 szitatálcához	(06643200)
A 803	Adapter HuW/turbinák számára (3 db.)	(9863100)
E 337/1	Betét álló műszerekhez	(7984130)
A 800	Szűrőcső	(9960680)
A 804	Tisztítókefe szűrőcsőhöz	(9960720)
A 836	Fogászati fúvóka készlet	(11054660)

Dent 2 kedvezményes csomag szett – nyelek és könyökdarabok előkészítése nélkül

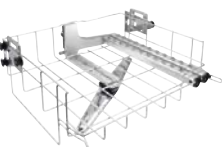

A 105/1 felső kosár/
injektor

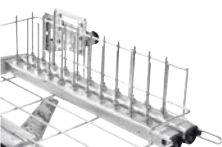

A 836 fogászati fúvóka
készlet



A 151 alsó kosár/fiók



E 337/1 betét
álló műszerekhez



E 430/1 betét
1/3 szitatálcához




E 473/2 betét

Komponensek	Leírás	Anyagszám
Kedvezményes csomag	PG 8581 és PG 8591	10882990
részei:		
A 105/1	Felső kosár/injektor	(10777260)
A 151	Alsó kosár/fiók	(9862410)
E 430/1	Betét 1/3 szitatálcához	(06643200)
E 473/2	Betét	(10623720)
E 337/1	Betét álló műszerekhez	(7984130)
A 836	Fogászati fúvóka készlet	(11054660)

Kosárkomponensek a PG 8581 és PG 8591 számára


Kosarak és kosárkomponensek

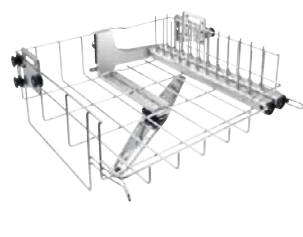

A 105/1 felső kosár/injektor

- A bal oldal betétek elhelyezésére szolgál
- Jobb oldal 22 injektorhelyel, például az A 833 injektorfúvókához (nem mellékelte)
- Állítható magasságú
- A nyelek és könyökdarabok aktív belső szárítása
- Az A 800 szűrőcső mindkét injektorlécben használható (a csomagolás nem tartalmazza)
- Beépített mosogatókar
- Berakodási méret: mag. 225 +/- 30 mm szé. 360 mm mély. 445 mm (a bal oldalon 215 mm szélesség felett 460 mm mélység áll rendelkezésre)
- Ma. 202, szé. 528, mé. 526 mm


Cikksz.: 10777260

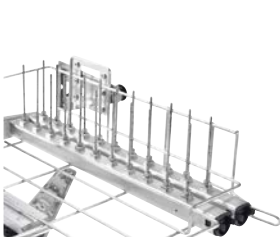

A 836 fogászati fúvóka készlet

- Az A 105/1 felső kosár berakodásához és az üreges eszközök előkészítéséhez
- 22x A 833 injektorfúvókát tartalmaz

Cikksz.: 11054660

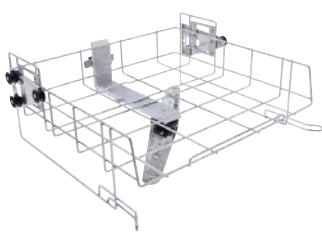

A 102 felső kosár/fiók

- Az elülső oldalon nyitva
- Betétek befogásához
- Állítható magasságú
- Berakodási méret: H 205 +/- 30, B 475, T 443 mm
- Beépített mosogatókar
- Ma. 206, szé. 528, mé. 527 mm



Cikksz.: 9862360



A 151 alsó kosár/fiók

- A piacon megtalálható
- DIN szítatálca és különféle betétek befogására
- Berakodási magasság a következővel együtt A 102 ma.: 230 +/- 30 mm A 105 ma.: 210 mm
- Ma. 88, szé. 529, mé. 522 mm



Cikksz.: 9862410

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Befogók, adapterek, kulcskészlet



A 803 befogó kézi műszerekhez

- kézi darabok befogásához az A 105/1 felső kosárban és az A 315 modul befogásához az A 800 szűrőcsővel együtt
- Különféle gyártmányú nyelekhez, könyökdarabokhoz és turbinákhoz alkalmas

Cikksz.: 9863100



A 812 adapter

- Az A 814 és/vagy A 815 használatához a G 7881/G 7891 típusban
- Az O 177/1 felső kosárban történő felhasználáshoz szűrőlemezzel
- 4 x E 362 vakcsavar
- 5 x szűrőlemez
- A G 7831 típusban való használatlalt kapcsolatos információért lépjen velünk kapcsolatba.

Cikksz.: 10619680



ÚJ: A 865 adapter

- Az MF- és 3F-fecskendők kanüljeinek optimális befogásához
- Az A 105/1 felső kosárban és az A 315 modulban használható
- Kizárólag az A 800-as szűrőcsővel együtt használható
- Sok ismert gyártó kanüljével kompatibilis
- Ma. 122 mm, szé. 32 mm, mé. 28 mm


Cikksz.: 11709860



A 838 kulcskészlet

- Torx csavarhúzóból és franciakuclsból áll
- Alkalmas Miele felső kosarakhoz és rakodókocsikhoz

Cikksz.: 11054290

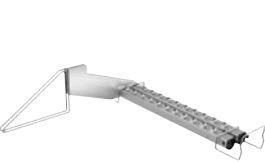

ÚJ: A 315 modul/injektor

- A üreges eszközök kapacitásának megkettőzéséhez az A 105 vagy A 105/1 injektor felső kosár egyidejű használata esetén
- A 151 alsó kosárba helyezhető
- 22 injektorfúvókához (nem mellékelte, használható pl. A 836.)
- A nyelek és könyökdarabok aktív belső szárítása
- Az A 800 szűrőcső mindkét injektorlécben használható (a csomagolás nem tartalmazza)
- Felszerelési méret az A 151 alsó kosárban való használat esetén és az A 105/1 H 210 +/- 30, B 383 felső kosár egyidejű használata esetén, T 479 mm
- Az injektorléc berakodási magassága az A 105/1 felső kosár használata esetén 135 mm +/- 30 mm
- Ma. 145, szé. 492, mé. 542 mm

Cikksz.: 11055980



A 800 szűrőcső

- Az A 105 /1 felső kosárban és az A 315 modulban/injektorban való használatához

Cikksz.: 9960680



A 804 tisztítókefe

- Az A 800 szűrőcső kézi előkészítéséhez

Cikksz.: 9960720



UBS 3 átépítőkészlet

- az O 177/1 felső kosár használatához a PG 8581 vagy PG 8591 típusban
- A felső kosár módosítása az ügyfélszolgálaton keresztül történik

Cikksz.: 10131110

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Az A 801 adapterrel használható befogók és szűrők



AUF 1 befogó

- Befogó kézi darabokhoz az O 177/1 felső kosárban a G 7881 és G 7891 számára
- Ezen kívül az A 801 adapterrel az A 105/1 felső kosárban használható
- Tömítésből, csavarokból, csipeszekből, tartó alsó részből, tartó felső részből, 5 szűrőlemezből áll

Cikksz.: 5159510



AUF 2 befogó a G 7831 számára

- Befogó kézi darabokhoz az O 801/2 felső kosárban
- Ezen kívül az A 801 adapterrel az A 105/1 felső kosárban használható
- Tömítésből, csavarokból, csipeszekből, tartó alsó részből, tartó felső részből, 5 szűrőlemezből áll

Cikksz.: 5282470



FP szűrőlemez az AUF 1 és AUF 2 számára

- 20 darab
- 2-es porozitás
- Átmérő: 30 mm

Cikksz.: 6059480



A 801 adapter

- Adapter az AUF 1 és AUF 2 az A 105/1-el való együttes használathoz.

Cikksz.: 9862940

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Fúvókák injektorléccel ellátott kosarakhoz



A 832 injektorfúvóka

- Hosszúság: 60 mm, Ø2,5 mm, becsavarható
- Kiegészítő oldalsó furatokkal

Cikksz.: 10635440



A 816 injektorfúvóka

- Hosszúság: 90 mm, Ø 2,5 mm, becsavarható
- Kiegészítő oldalsó furatokkal

Cikksz.: 10635660



A 833 injektorfúvóka

- Tartókapocs
- Hosszúság: 110 mm, Ø4 mm, becsavarható
- Kiegészítő oldalsó furatokkal

Cikksz.: 10635480



A 834 injektorfúvóka

- Hosszúság: 150 mm, Ø 8 mm, becsavarható
- Rugó a magasság állításához (cikksz.: 4 692 430)
- Kiegészítő oldalsó furatokkal


Cikksz.: 10635650



ADS 1 adapter/szilikon AUF 1 és AUF 2 számára

- Adapter a kézi műszerek befogásához
- Nyelekhez és könyökdarabokhoz/turbinákhoz kb. 20 mm-es Ø-vel
- Fehér


Cikksz.: 5159530

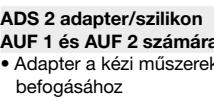

ADS 2 adapter/szilikon AUF 1 és AUF 2 számára

- Adapter a kézi műszerek befogásához
- **Nyelekhez és könyökdarabokhoz/turbinákhoz kb. 16 mm-es Ø-vel**
- Zöld

Cikksz.: 5159540

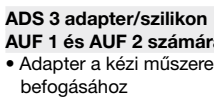

ADS 3 adapter/szilikon AUF 1 és AUF 2 számára

- Adapter a kézi műszerek befogásához
- Nyelekhez és könyökdarabokhoz/turbinákhoz kb. 22 mm-es Ø-vel
- Piros

Cikksz.: 5159550



E 336 öblítőhüvely

- Hosszúság: 121 mm, Ø 11 mm

Cikksz.: 3809390



A 817 öblítőhüvely

- Hosszúság: 65 mm, Ø 11 mm
- Sapka, nyílás: Ø 6 mm (cikksz.: 4 174 960)
- Rögzítőbilincs (cikksz.: 4 174 850)

Cikksz.: 10706260



A 818 fedelek

- 12 db öblítőhüvely-sapka
- Nyílás: Ø 2,5 mm

Cikksz.: 10706620



A 819 öblítőhüvely

- Üreges eszközök számára, például UH eszközökhöz, pl. Cavitron-hoz® (klasszikus fogantyúval és FitGrippel)*
- Belső méret: 108 mm, külső méret: 128 mm, Ø 11 mm
- Sapka, nyílás: Ø 10 mm
- Rögzítőbilincs – használat kizárólag alkalmazással
- *A Cavitron a Dentsply-Sirona cég bejegyzett márkája

Cikksz.: 10721750

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Betétek



- E 198 betét 1/2**
- 6 szűrőtálca/vesetál számára
 - 7 tartó (6 rekesz), mag. 160, távolság: 50 mm
 - Ma. 160, szé. 180, mé. 495 mm
 - Az E 197 szűrőtálca befogásához

Cikksz.: 7984040



- E 363 betét 1/6 szitatálca**
- 1 mm hálós méret, fedéllel
 - kivétel nélkül a műszerek rögzítéséhez
 - Ma. 55, szé. 150, mé. 225 mm

Cikksz.: 3149790



- E 131/1 betét 1/2**
- 5 szűrőtálca/vesetál számára
 - 6 tartó, magasság: 160 mm, távolság: 80 mm
 - Alsó kosár számára
 - Ma. 168, szé. 180, mé. 495 mm (az alsó kosárban az E 363 típussal együtt)
 - Az E 363 szűrőtálca befogásához

Cikksz.: 5771030



- A 830 betét**
- Az E 337/1 betétben való használathoz a szétszedhető szájtükrök munkavégeinek optimális befogásához
 - 3 rekesz Ø 8 mm, 14 rekesz 10 x 19 mm, 2 rekesz 8 x 19 mm
 - Szájtükrök fogantyúi (≥ 3 méget) beállíthatók az E 337/1 rekeszeiben
 - Ma. 12, szé. 49, mé. 154 mm

Cikksz.: 10730400

- ÚJ: A 830/1 betét**
- Az E 337/1 és E 802/1 betétben való használathoz, a szétszedhető szájtükrök munkavégeinek optimális befogásához (méret ≥ 3)
 - 3 rekesz Ø 8 mm, 14 rekesz 10 x 19 mm, valamint 2 rekesz 8 x 19 mm
 - A szájtükrök fogantyúi beállíthatók az E 337/1, illetve az E 802/1 rekeszekbe.
 - Ma. 12, szé. 49, mé. 159 mm

Cikksz.: 11729480

Rendelkezésre áll 2021. 2. negyedévtől



- E 130 betét 1/2**
- 10 tálcához
 - 11 tartó (10 rekesz), mag. 170, távolság: 35 mm
 - Ma. 180, szé. 180, mé. 445 mm

Cikksz.: 2648950



- E 523 betét 1/2**
- Szitatálcákhoz
 - 7 tartó (6 rekesz), mag. 145, távolság: 50 mm
 - Ma. 151, szé. 220, mé. 450 mm

Cikksz.: 5649700



- ÚJ: A 317 betét**
- 6 nagy szitatálca optimális befogásához
 - 7 tartóval
 - A beállítható dőlés akár 18 nagy szitatálca behelyezését teszi lehetővé a PG 8581 és PG 8591 készülékekbe
 - Ma. 145 mm, szé. 155 mm, mé. 465 mm

Cikksz.: 11710110



- E 339/1 betét 3/5**
- 12 tálca-alsórészhez/tálcához
 - 14 tartó (13 rekesz) szél. 295, távolság 37 mm
 - Max. tálcaméret 290 x 30 mm (széxmé)
 - Ma. 115, szé. 305, mé. 498 mm

Cikksz.: 9233840



- E 337/1 betét 2/5**
- Álló műszerek befogásához
 - 4 műanyag befogó 12 fiók kb. 22 x 28 mm 4 fiók kb. 25 x 28 mm 48 fiók kb. 13 x 14 mm
 - Ma. 148, szé. 173, mé. 445 mm

Cikksz.: 7984130



- E 468 betét**
- Szitakosár fedéllel
 - Sebészeti motor előkészítéséhez a támaszték eltávolítása után
 - Vegye figyelembe a gyártó előkészítésre vonatkozó utasításait
 - nemesacélból
 - A hálós méretei: 5 x 5 x 1 mm
 - Ma. 70/76, szé. 250, mé. 170 mm
 - nem helyezhető be a következőbe: E 198

Cikksz.: 05043640



- E 476 befogó**
- 5 mm vastag szűrőkben történő használatra
 - 4–8 mm átmérőjű műszerek befogásához és a sebészeti motorok rögzítéséhez az E 468 szűrőtálcában
 - 50 darab/zacskó

Cikksz.: 05692400



- E 378 betét 1/1 szitakosár**
- 1,7 mm-es huzalfonat, széles háló
 - 2 hordozó fogantyú
 - ma. 80 + 30, szé. 460, mé. 460 mm

Cikksz.: 3203530



- E 379 betét 1/2 szitakosár**
- 1,7 mm-es huzalfonat, széles háló
 - 2 hordozó fogantyú
 - ma. 80 + 30, szé. 180, mé. 445 mm

Cikksz.: 3203500



- E 806/1 betét**
- 8 tálca-alsórészhez/tálcához
 - 9 tartó (8 rekesz)
 - Max. tálcaméret 290 x 30 mm (széxmé)
 - Ma. 114, szé. 305, mé. 348 mm

Cikksz.: 9013220

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Betétek



- E 430/1 betét 1/3 szitatálcahoz**
- Műszerek befogásához
 - 5 mm-es huzalfonat, széles háló
 - Ma. 40, szé. 150, mé. 445 mm

Cikksz.: 06643200



- E 441/1 betét 1/4**
- Szűrőtálca mikro műszerekhez
 - Huzalfonat 1,7 mm-es hálóval, oldalt zárt, összetűzhető
 - Belső beosztás 6 felállítható támasztékkal, a műszer kímélő tároláshoz
 - Gözzel sterilizálható 121 °C/134 °C-on
 - Ma. 60, szé. 183, mé. 284 mm

Cikksz.: 5988240



- E 520 betét**
- 17 gyökérkezelési eszközkhöz
 - Összecsukható
 - Gözzel sterilizálható 121 °C/134 °C-on
 - Ma. 45, szé. 75, mé. 30 mm

Cikksz.: 5409080



- E 147/1 betét 1/2**
- 10–12 szájöblítő pohárhoz, max. Ø 80 mm
 - Riléznozott
 - Ma. 155, szé. 220, mé. 455 mm

Cikksz.: 4746620

Komponensek a PG 8581 és a PG 8591 számára

Technológiai vegyszerek adagolásához és alépítmények



- PG 8596 adagolószekrény**
- Technológiai vegyszerek és adagoló-modulok tárolószekrénye
- ma. 835 (820), szé. 300, mé. 600 mm
 - Kompatibilis a következő típusokkal: PG 8581, PG 8591
 - Szabadon álló készülék, alépíthető
 - Szekrény, levehető ajtóval
 - Külső burkolat, választható nemesacél (AE) vagy fehér (AW)
 - Belső méretek: ma. 690/380/285 mm (a felső fiók kiszerezésével/alsó/ felső fiók), szé. 250 mm, mé. 555/425 mm (felfogótálcával és adagolómodulokkal, illetve ezek nélkül)

2 szintre felosztva: kihúzható, teleszkópos síneken vezetett fiókok felfogótálcával, technológiai vegyszert tartalmazó tartályok behelyezéséhez

Tartáyméretek (hosszúság x szé x ma.)
Összesen 6 db, egyenként 5 l-es (ho. 245 x szé. 145 x ma 225 mm*) tartály elhelyezésére van lehetőség.
Az alsó fiók nagyobb göngyöleg beállítását is lehetővé teszi:
2 db, egyenként 10 l es tartály, mére-tük: 140 x 193 x 307 mm
2 db, egyenként 10 l es tartály, mére-tük: 223 x 203 x 321 mm
2 db, egyenként 10 l es tartály, mére-tük: 229 x 193 x 323 mm
2 db, egyenként 10 l es tartály, mére-tük: 194 x 204 x 353 mm
1 db, egyenként 20 l es tartály, mére-tük: 289 x 233 x 396 mm
1 db, egyenként 25 l es tartály, mére-tük: 288 x 234 x 456 mm

PG 8596 D AW DOS-szekrény
Cikksz.: 10087330

PG 8596 D AE DOS-szekrény
Cikksz.: 10087340

* Csak rövid szívólándzsás, DOS K 85/1 flex típusú adagolómo-dullal valósítható meg.



- DOS K 85/1 flex adagolómodul**
- Folyékony közegekhez, pl. bázisos tisztítószer, kém. fertőtlenítőszer, semlegesítőszer
 - Tömrlős adagolószivattyú, a berendezés vezérlésével állítható
 - Beépített adagolásfelügyeleti funkció a nagyobb folyamatbiztonság jegyében az EN ISO 15883 szerint
 - Rövid szívólándzsa (217 mm) 5 l-es tartályokhoz (a tartályok töltésszint-felügyelettel vannak ellátva)
 - Csatlakozókábel hossza: 3,00 m
 - Szívóvezeték hossza: 1,80 m
 - Követő termék a DOS K85/1 számára

Cikksz.: 09961080



- UG 30-60/60-85 alépítmény**
- A PG 8581 és PG 8591 típushoz használható
 - Nemesacél alépítmény, a készülékkel összezsavarozható
 - Ma. 300, szé. 600, mé. 600 mm

Cikksz.: 10087350



- DOS K 85 flex adagolómodul**
- Lásd: DOS K 85/1 flex
 - Azonban hosszú szívólándzsa, 5- és 10 l-es tartályhoz (352 mm)
 - Opció: hosszú szívólándzsa 20–30 literes tartályhoz (467 mm), valamint a hozzá illő fedél beszerezhető az ügyfélszolgálaton keresztül (cikksz.: 11033480 és 11033560)
 - Követő termék a DOS K85 számára

Cikksz.: 09961070



- UG 30-90/60-85 alépítmény**
- A PG 8581 és PG 8591 típushoz használható a PG 8595 vagy PG 8596 típussal együtt (kétoldali felállításra van lehetőség, PG 8595/ PG 8596)
 - Nemesacél alépítmény, a készülékkel összezsavarozható
 - Ma. 300, szé. 900, mé. 600 mm

Cikksz.: 10087360

Komponensek az összes Miele termikus fertőtlenítőhöz

Betétek



- E 197 betét 1/6 szitatálca**
- Műszerek befogásához
 - Huzalvastagág a következő hálóval: 3 mm alul, 1,7 mm oldalt, 8 mm felül
 - Gőzzel sterilizálható 121 °C/134 °C-on
 - Ma. 42, szé. 150, mé. 225 mm

Cikksz.: 7984090




- E 473/2 betét**
- Szita fedéllel kisméretű alkatrészekhez
 - Szitatálcába való beakasztáshoz
 - Ma. 88, szé. 66, mé. 66 mm

Cikksz.: 10623720



- E 491 betét**
- Betét forgó műszerekhez
 - 18 turbinaszárhoz
 - 30 könyökdarab szárhoz
 - Ma. 53, szé. 70, mé. 120 mm

Cikksz.: 7600210

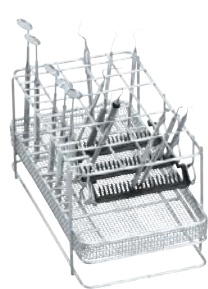

- E 802/1 betét**
- Műszerek, álló
 - 3 műanyag befogó
 - 8 fiók kb. 30 x 28 mm
 - 8 fiók kb. 16 x 28 mm
 - 15 fiók kb. 16 x 20 mm
 - Ma. 148, szé. 163, mé. 295 mm

Cikksz.: 7984170



- E 143 betét**
- Betét a különféle eszközök optimális befogásához.
 - 1 mm-es huzalfonat, 5 mm-es keret
 - 2 súllyeszthető hordozónyéllel

Cikksz.: 03830310



- A 815 fúvóka**
- Kézi műszerek külső spray-vel végzett előkészítéséhez
 - Az A 812, A 813/1 vagy az A 105 felső kosárban A 800 szűrővel történő felhasználáshoz
 - 4x fúvóka szilikon tömlővel

Cikksz.: 10619690



- ÚJ: A 813/1 adapter**
- Akár 4 kézi műszer külső spray-vel végzett előkészítéséhez
 - Két részes, felső- és alsó részből áll, tartozékokkal
 - 4x fúvóka szilikon tömlővel
 - 3 x E 362 vakcsavar
 - Az A 105 és A 105/1 felső kosárban, valamint az A 315 modulban történő felhasználáshoz – felhasználás kizárólag az A 800 szűrőcsővel együtt
 - ÚJ: az APWD 061 kosárban történő felhasználáshoz – felhasználás kizárólag az APWD 069 szűrőlemezzel és az A 822 adapterrel

Cikksz.: 11763880




- ÚJ: A 814/1 adapter**
- Az Air Scaler és Piezo Scaler éleinek előkészítéséhez
 - Gyártófüggetlen, számos különféle csúcshoz
 - Több befogó használata egy injektorcsatlakozón az A 813/1 vagy az A 812 típussal lehetséges
 - Az A 105, A 105/1, O 177/1, valamint APWD 061 kosarakban és az A 315 modulban való használatra
 - A felhasználás az A 105, A 105/1 és A 315-ben kizárólag az A 800-as szűrőcsővel együtt lehetséges
 - Az O 177/1-ben történő felhasználás kizárólag az FP szűrőlemezzel és az A 812 befogóval együtt lehetséges
 - Felhasználás az APWD 061 kosárban kizárólag az A 822 adapterrel és az A 813/1 adapterrel APWD 069 szűrővel
 - Átmérő: 22 mm, magasság: 48 mm

Cikksz.: 11691870



- ÚJ: A 830/1 betét**
- Az E 337/1 és E 802/1 betétben való használathoz, a szétszedhető szájtűkrök munkavégeinek optimális befogásához (méret ≥ 3)
 - 3 rekesz Ø 8 mm, 14 rekesz 10 x 19 mm, valamint 2 rekesz 8 x 19 mm
 - A szájtűkrök fogantyúi beállíthatók az E 337/1, illetve az E 802/1 rekeszekbe.
 - Ma. 12, szé. 49, mé. 159 mm

Cikksz.: 11729480

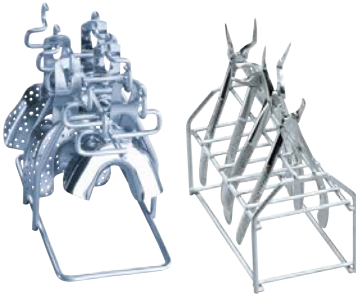

- E 522/1 betét (bal)**
- 9 tartók a lenyomatkanalak beakasztásához
 - Ma. 140, szé. 100, mé. 190 mm

Cikksz.: 6697010



- E 521/2 betét (jobb)**
- 7 extrakciós fogó, fogsabályozási ill. technológiai fogók befogásához
 - Rekeszméret: 21 x 80 mm
 - Ma. 135, szé. 100, mé. 189 mm

Cikksz.: 7476430



- E 807 betét**
- 3 szitatálca/vesetál számára
 - 4 tartó (3 rekesz), mag. 165, távolság: 58 mm
 - Ma. 144, szé. 180, mé. 330 mm

Cikksz.: 7984220

Komponensek az összes Miele termikus fertőtlenítőhöz

Teljesen sómentesített vízzel való előkészítéshez



PG 8595 Aqua Purificator
Tárolószekrény a 2 VE P 2000/VE P 2800 deionizáló patron befogá-sához

- Kompatibilis a következő típusokkal: PG 8581, PG 8591
- Általánosságban javasolt minőség utóblításhoz < 19 µS/cm
- ma. 835 (820), szé. 300, mé. 600 mm
- Önálló készülék, pult alá építhető
- Külső burkolat, választható nemesacél (AE) vagy fehér (AW)
- Kiszállítási állapot: üres tárolószekrény; a szükséges felszerelést külön kell megrendelni

PG 8595 D AW Aqua Purificator
Cikksz.: 10087310

PG 8595 D AE Aqua Purificator
Cikksz.: 10087320

Vízpatronok SK gyorscsatlakozásai
Átszerelőkészlet egyszerű patroncseréhez; részei:

- 2 db VA csatlakozó 3/4"/SK, közvetlenül a patronra csavarozható
- 2 db, 3/4" gyorscsatlakozó PVC kettős csőkapcsoló tömítésekkel a meglévő tömlőkészlethez

Cikksz.: 09782600

UFZ átszerelőkészlet második patronhoz
Két patronnal való munkavégzésnél a 2 db, 3/4" méretű VA dugós csatlakozó a második patronra csavarozható. Ezáltal az első patron dugós csatlakozójának leszerelését nem kell elvégezni.

Cikksz.: 10020100



VE P 2800 teljesen sómentesítő patron, töltött

- Nyomásálló nemesacél patron
- Maximális átfolyási mennyiség: 800 l/h
- Magasság: 570, átmérő: 230 mm
- Komplet légtelenítő- és nyomáscsökkentő szelep
- 19 liter homogén kevert, regenerálható gyantával töltve

Cikksz.: 09782560

LP 2800 deionizáló patron, üres

- Ugyanaz, mint a VE P 2800, azonban: kiszállítási állapot: gyanták nélkül. 19 liter, eldobható gyantával tölthető.

Cikksz.: 09782590

E 315 eldobható gyanta

- 20 liter homogén gyantaelegy az LP 2800 típushoz
- 2 db, egyenként 10 literes tasakot tartalmazó kartondoboz, vákuumozott, műanyag zacskókba forrasztott
- Szűrőzsák a cseréhez

Cikksz.: 03830350

E 316 áttöltőkészlet

- Műanyag hordó fedéllel és tölcsérrel 30 liter eldobható gyantához

Cikksz.: 03830360



VE P 2000 teljesen sómentesítő patron, töltött

- Nyomásálló nemesacél patron
- Maximális átfolyási mennyiség: 450 l/h
- Magasság: 410, átmérő: 230 mm
- Komplet légtelenítő- és nyomáscsökkentő szelep
- 12,5 liter homogén kevert, regenerálható gyantával töltve

Cikksz.: 09773410



CM/1 ConductivityMeter
Vezetőképességmérő modul VE P 2000 és VE P 2800 VE-vízpatronokhoz

- Egysoros, megvilágított kijelző
- 10 kapcsolási pont a 0–199,9 µS/cm mérési tartományban
- A patroncsere szükségességének optikai és akusztikus kijelzése
- Optikai és akusztikus hibakijelzés
- Fali tartó
- Csatlakoztatás külső LED-hez (opcionális)
- Ma. 118, szé. 235, mé. 110 mm
- Bemenet: 110–240 V, 50/60 Hz, 85 mA; kimenet: 9 V, 400 mA, 3,6 A
- Szállítási csomag: mérőcella LED-kijelzővel és csatlakozókábellel (hossz: 1,0 m), 2 db, 3/4" nyomótömlő (hossz: 1 X 1,94 m, 1 x 1,5 m)

Cikksz.: 10889920

Folyamatdokumentációs rendszer

Tanúsított biztonság a rendszerrel



APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition

- Folyamatdokumentációs szoftver számítógépes csatlakozáshoz vagy hálózati kapcsolat kiépítése céljából

Teljesítményszint

- Szoftverletöltés*, szoftvercsomag: Comfort Plus, telepítési útmutató PDF-formátumban, licenckártya¹ 1 készülékhez

Csatlakoztatható készülékek maximális száma

- Soros csatlakoztatás: 4 készülék
- Hálózati kapcsolat: tetszés szerinti számú készülék

Adatátvitel

- A készülék közvetlen csatlakoztatása a számítógéphez vagy a hálózatra kapcsolt rendelői számítógéphez

Készülékkompatibilitás

- Miele termikus fertőtlenítők és kis sterilizátorok
- Más gyártók készülékei: kérésre

Cikksz.: 10019160



APH 550 Sego – címkenyomtató a Segolabel Miele Edition és a CUBE/CUBE X sterilizátorok számára

- Teljes szoftverből és hardverből álló csomag sterilizált cikkek címkéinek nyomtatásához

Teljesítményszint

- Szoftver CD*, a telepítési útmutató, a PRT 200 címkenyomtató hálózati csatlakozóval (kábelhossz: 3,8 m) és USB kábellel (hossz: 2 m)
- 1 egyenként 1 000 címkét tartalmazó címketekerics
- Elszíneződési skála

APH 595 – elszíneződési skála

- Utólag megvásárolható elszíneződési skála APH 550 Sego címkenyomtató számára

Cikksz.: 7951520

APH 596 – címkék

- Címkék APH 550 Sego címkenyomtató számára

Szállítási csomag

- 1 db 1 000 címkét tartalmazó tekerics

Cikksz.: 7951530



APS 102 Sego – SegoAssign Plus:

- Opcionális licenc a Segosoft Miele Edition és a rendelőben használt betegnyilvántartó rendszer összekapcsolásához a tételek betegekhez való hozzárendelése érdekében papírmentesen, egyszerűen és gyorsan.

Teljesítményszint

- Licenckártya¹

Cikksz.: 10106600



APH 510 PRT110 – protokollnyomtató

- Nyomtató a folyamatprotokollok nyomtatásához

Cikksz.: 11053310

Készülékkompatibilitás

- Az összes Miele termikus fertőtlenítő
- PG 8581 és PG 8591 csak az XKM RS232 10 Med soros kommunikációs modulal összekapcsolva
- APH 530 – nyomtatókábel APH 510 PRT110 nyomtatóhoz

Cikksz.: 6095260

- 15 m hosszúságú nyomtatókábel (a kábel nem része a nyomtató szállítási csomagjának)
- Patronok, papírtekercs
- APH 592 – fekete festékszalag
- APH 510 PRT110 nyomtatóhoz

Cikksz.: 11053500

- APH 591 – papírtekercs, 5 db. APH 510 PRT110 esetén

Cikksz.: 9063410

Rendszerfeltételek az összes szoftverrendszerre vonatkozóan

- CPU-ütemfrekvencia min. 3 GHz vagy nagyobb
- SVGA grafikus rendszer 1024 x 768 képponttal, javaslat: 21" vagy nagyobb képernyő, javaslat: HD 1920 x 1080 képpont
- Legalább 4 GB kapacitású műveleti tároló, javaslat: 8 GB
- Legalább 64 GB szabad tárhellyel rendelkező merevlemez, javaslat: 256 GB
- Min. 2 USB-port, javaslat: 3 USB-port, hálózati interfész, internet-hozzáférés
- Operációs rendszerek: Windows 8.1, Windows 10
- Adobe Acrobat Reader (a 11.08-as vagy újabb verziótól)
- Javaslat: tartalékrendszer

Szoftverletöltés

- <https://www.miele.de/professional/service-und-support-52.htm>

A Miele szervizpartnertől elvárt további követelmények:

Megfelelő teljesítményszintet biztosító szervizkártya (a Segosoft Miele Edition esetén kötelező!)

- A digitális aláírás frissítése meghosszabbított érvényességhez
- Telefonos támogatás, szoftverfrissítések
- Átalánydíjas éves díj rendeléenként: 215 euró (SegoAssign Plus nélkül)
- Átalánydíjas éves díj rendeléenként: 295 euró (SegoAssign Plus esetén is)

Információ: a digitális aláírás érvényessége a Segosoft Miele Editionben a BSI előírása szerint (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Az érvényesség meghosszabbítása a fizetős szervizkártyával együtt történik. Éves díj rendeléenként: 215 euró (SegoAssign Plus nélkül)

¹ Szükséges kiegészítő szolgáltatás: szervizkártya (szoftver karbantartás/támogatás)



APH 100 – soros csatlakozójú ipari konverter

- Max. 2 Miele termikus fertőtlenítő soros csatlakoztatására
- A sorozatgyártott ipari konverter és a számítógép USB-porton keresztül történő összekapcsolása
- Az összes csatlakozás galvanikus leválasztása

Teljesítményszint

- Hálózati tápegység
- Áramkábel hossza: 1,4 m
- USB-kábel, 0,5 m

Készülékkompatibilitás

- Miele PWD 8531, PWD 8532 tisztító- és fertőtlenítőkészülékek
- Méretek: (ma. x ho. x szé.): 31 x 90 x 109 mm
- Más gyártók készülékeihez is csatlakoztatható

Cikksz.: 9574000



APH 110 Net500 – Net500 hálózati konverter

- Soros interfésszel rendelkező készülékek rendelői hálózatba kapcsolása (hálózati kapcsolás a 3. opció szerint)
- A soros adatok (RS 232) konvertálása hálózati adatokká (TCP/IP)
- Más gyártók készülékeihez is csatlakoztatható

Teljesítményszint

- Hálózati tápegység
- Áramkábel hossza: 1,4 m
- Méret: (magasság x hosszúság x szélesség): 31 x 90 x 109 mm

Összekötő kábel Net500 konverterhez

- Kábel a készülék oldalán: soros összekötő kábel (1. vagy 2. típus, a készülék típusától függően) a készülék Net500 konverterrel való összekapcsolásához
- Hálózati oldali kábel: hálózati kábel (6. vagy 7. típus, a kívánt hossz függvényében) a Net 500 konverter összekapcsolásához a rendelői hálózattal

Cikksz.: 9687440

További komponensek a folyamatdokumentációhoz

További termékek	Anyagszám
APH 301 – összekötő kábel, soros, hosszúság: 3 m (1. TÍPUS))	7951420
APH 302 – összekötő kábel, soros, hosszúság: 3 m (2. TÍPUS))	7951410
APH 303 – hosszabbító kábel, 3 m (3. TÍPUS) 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	7951430
APH 304 – hosszabbító kábel, 5 m (4. TÍPUS) 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	7951440
APH 305 – hosszabbító kábel, 10 m (5. TÍPUS) 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	7951450
APH 330 – Adapter Gender Changer, pl. Hawo tűkorkészülékhez	7986870
APH 331 – Melag összekötő kábel (Vacuklav 24, 31, Autoclav 25), hosszúság: 3 m, kiegészítőleg az 1. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	9573240
APH 332 – W&H adapter (Lisa 317, 322, 517, 522), hosszúság: 3 m, kiegészítésként a 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	9553890
APH 333 – W&H/Madrimed adapter (Lisa MB17, MB22, Madrimed), hosszúság: 3 m, kiegészítésként az 1. TÍPUSÚ összekötő kábelhez	9554370
APH 406 – hálózati kábel, hosszúság: 3 m (hálózati kábel) (6. TÍPUS)	7951470
APH 407 – hálózati kábel, hosszúság: 5 m (hálózati kábel) (7. TÍPUS)	7951480
APH 408 – Crossover hálózati kábel, hosszúság: 3 m (PC közvetlen összeköttetés) (8. TÍPUS)	7951490
APH 409 – Crossover hálózati kábel, hosszúság: 5 m (PC közvetlen összeköttetés) (9. TÍPUS)	7951500
APH 531 – adapter (null modem) az APH 510 PRT110 nyomtatókábelhez	9573970
APH 590 – nyomtatópatron a korábbi APH 500 PRT100 protokollnyomtatóhoz	9063390
RJ 45 kapcsolóegység	7076891

¹ Szükséges kiegészítő szolgáltatás: szervizkártya (szoftver karbantartás/támogatás)

Kommunikációs modulok a folyamatdokumentációhoz

Komponensek



- XKM 3000 L Med Ethernet modul**
- Kommunikációs modul a Segosoft Miele Edition vagy más folyamatdokumentációs-szoftver csatlakoztatásához
 - Gyűrű memória maximum 30 folyamat- és 2 grafikus protokollhoz
 - Használható kiegészítő közvetlen vagy hálózati kapcsolathoz nem szükséges egyéb komponens nélkül
 - A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) támogatása hálózati paraméterek automatikus beállításához
 - Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s
 - Csatlakozókábel hossza: 1,5 m
 - A kábelhosszabbítás a mellékelt csatlakozón keresztül lehetséges

Cikksz.: 10440980



- XKM RS232 10 Med soros modul**
- Kommunikációs modul az APH 510 PRT110 típusú protokollnyomtatóhoz való csatlakoztatáshoz
 - Gyűrű memória max. 25 folyamatprotokollhoz
 - A rövid- és hosszú protokollok megkülönböztetése a protokoll hosszúságoknak az ügyfél szükségleteinek hozzáigazításához
 - Átviteli sebesség: max. 38 kBit
 - Csatlakozókábel hossza: 1,5 m
 - Hosszabbító összesen 15 méterig lehetséges

Opcionális a PG 8581 és PG 8591 készülékekhez.

Cikksz.: 10444420



- DataDiary**
- PG 8581 és PG 8591 termikus fertőtlenítők számára
 - A rendelő helyi hálózatára való csatlakoztatás
 - Wi-Fi XKM 3100 W CDS kommunikációs modul
 - 5 NFC chipkártya
 - Telepítési és használati útmutató
 - A tabletet a szállítási csomag nem tartalmazza

A PG 8581 és PG 8591 készülékek szállítási csomagjában, ha a készlet Wi-Fi-vel van kiválasztva.

Cikksz.: 10689630



- Wi-Fi dongle APST 002**
- Wi-Fi dongle kulcs CUBE és CUBE X kis sterilizátorok számára
 - Wi-Fi infrastruktúrában vagy hozzáférési pont módban való üzemeltetéshez
 - A helyi hálózatban az engedélyezett jegyzéken keresztül segíti az adatcserét.

Cikksz.: 11376380



- DataDiary CUBE**
- A CUBE és a CUBE X kis sterilizátorok számára
 - Wi-Fi dongle
 - 5 NFC chipkártya
 - A rendelő helyi Wi-Fi hálózatára való csatlakoztatás
 - A tabletet a szállítási csomag nem tartalmazza

Cikksz.: 11394260

Folyamatdokumentáció

Minden egy pillantásnyira

Folyamatdokumentáció							
		Közvetlen készülék és számítógépes csatlakoztatás		A rendelő hálózatra való csatlakoztatás			Nyomtató
		1. opció:	2. opció:	3. opció:	4. opció:	5. opció:	
		Számítógépes csatlakoztatás a készülékre soros interfésszel	Számítógépes csatlakoztatás a készülékre Ethernet modulal	Hálózati csatlakoztatás a készülékre soros interfésszel	Hálózati csatlakoztatás a készülékre oldali hálózati interfésszel (Ethernet, Wi-Fi)	Hálózati csatlakoztatás a készülékre XKM 3000 L Med Ethernet modulal	
		Pl. Miele PWD 853x termikus fertőtlenítő	Pl. Miele PG 858x/9x (XKM 3000 L Med-del) termikus fertőtlenítő	Pl. Miele PWD 853x termikus fertőtlenítő	Pl. Miele PG 858x/9x, PG 8536 termikus fertőtlenítő/CUBE, CUBE X kis sterilizátor	Pl. Miele PG 858x/9x termikus fertőtlenítő	Pl. Miele PG 858x/9x (XKM RS232 10 Med-del) termikus fertőtlenítő
DataDiary App		Cikksz.					
DataDiary – PG 858x/9x számára		10689630				X (csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül)	
DataDiary CUBE – CUBE/CUBE X számára		11394260				X (csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül)	
Segosoft Miele Edition		Cikksz.					
APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition (licenc) ¹		10019160	X	X	X	X	
APH 301 – 1. TÍPUSÚ összekötő kábel, soros, 3 m		7951420	X (1. típus vagy 2. típus, készüléktípustól függően)		X (1. típus vagy 2. típus, készüléktípustól függően)		
APH 302 – 2. TÍPUSÚ összekötő kábel, soros, 3 m		7951410					
APH 100 – sorozatgyártott ipari konverter		9574000	X (opcionális két készüléknél)				
APH 303 – 3. TÍPUSÚ hosszabbító kábel, 3 m, 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez		7951430	Opció				
APH 304 – 4. TÍPUSÚ hosszabbító kábel, 5 m, 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez		7951440	Opció				
APH 305 – 5. TÍPUSÚ hosszabbító kábel, 10 m, 1. vagy 2. TÍPUSÚ összekötő kábelhez		7951450	Opció				
APH 110 Net500 – hálózati konverter (RS 232 RJ45 hálózatra)		9687440			X		
APH 406 – 6. TÍPUSÚ hálózati kábel, 3 m (hálózati kábel)		7951470			X (6. TÍPUS vagy 7. TÍPUS a kívánt hosszúságtól függően.)	X (6. TÍPUS vagy 7. TÍPUS a kívánt hosszúságtól függően.)	X (6. TÍPUS vagy 7. TÍPUS a kívánt hosszúságtól függően.)
APH 407 – 7. TÍPUSÚ hálózati kábel, 5 m (hálózati kábel)		7951480					
APH 408 – 8. TÍPUSÚ hálózati kábel, Crossover, 3 m (PC közvetlen összeköttetés)		7951490			X (8. TÍPUS vagy 9. TÍPUS a kívánt hosszúságtól függően.)		
APH 409 – 9. TÍPUSÚ hálózati kábel, Crossover, 5 m (PC közvetlen összeköttetés)		7951500					
APH 510 PRT110 – protokollnyomtató, soros interfész		11053310					X
APH 530 – 15 m nyomtatókábel, soros APH 510 PRT110 nyomtatóhoz		6095260					X
APH 531 – null modem adapter nyomtatókábelhez		9573970					X
RJ 45 kapcsolóegység		7076891				opcionális (ha hosszabbító szükséges. XKM modul kábelhossz: 1,5 m.)	
X = szükséges, ¹ szükséges kiegészítő szolgáltatás: szervizkártya, szoftver karbantartás							

Textilápolás munkaruházat esetén

Az üzemi textilápolás előnyei és a tökéletes minőségbiztosítás

1

2

3

4

Fogorvosi rendelő

1. Munkaruházat a betegek kezelése után

2. A szennyezett ruha az ipari mosógépbe kerül

3. Mosás a fertőtlenítő programban és szárítókban ipari mosógépekben

4. Higiénikus, kifogástalan munkaruházat orvosok és személyzet számára

- Előnyök és a tökéletes minőségbiztosítás**
- Egyszerű logisztika zárt házon belüli rendszerben
 - A munkaruházat irányelveknek megfelelő tisztítása
 - Mosás bizonyítottan hatékony fertőtlenítő mosási eljárással
 - Gyors, rendelkezésre álló, tiszta munkaruházat
 - Olcsó tisztítás kis mennyiségek esetén is
 - A fertőtlenítő mosási folyamat folyamatos ellenőrzés alatt áll (nincs hibás kezelés miatti program megszakítás, hőmérséklet- és tartási idő felügyelet, üres állapot érzékelés folyékony adagolás esetén)

- Ezek a szabályok fertőtlenítő mosási eljárást javasolnak**
- Robert-Koch-Institut (RKI)
 - Deutsche gesetzliche Unfallversicherung – munkahelyi balesetbiztosításra vonatkozó német szabályozás
 - Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin – német fogászati, higiéniai munkacsoport
 - Kompetenzzentrum Hygiene und Medizinprodukte der Kassenärztlichen Vereinigung und Kassenärztlichen Bundesvereinigung – orvosok egyesületének és a körzeti orvosi egyesületek higiéniai és orvosi termékeinek kompetenciaközpontja
 - Higiéniai irányelv az orvosi rendelőkben

PROHygiene

- Kiegészítő higiéniai biztonság**
- Miele ProHygiene: a fertőtlenítési teljesítmény egyszerű ellenőrzése a bioindikátor segítségével

1

2

3

4

Orvosi rendelő

Magánháztartás

1. Munkaruházat a betegek kezelése után

2. Szennyezett ruhák szállítása nyilvános területeken

3. Magánháztartás: munkaruházat mosása magán háztartási mosógépekben fertőtlenítő program nélkül

4. Tiszta ruhák szállítása nyilvános területeken

- Hátrányok és ellenőrizhetetlen kockázatok**
- Szennyezett textilek nyitott szállítása
 - Időigényes mosási körfolyamat (több rendelő ruhát kell fenntartani)
 - Lehetséges keresztfertőzés a magán ruhákon keresztül
 - A háztartási mosógépek nem rendelkeznek megfelelő fertőtlenítő programmal
 - A rendelői ruhák esetleges fertőzése a magánháztartásból az orvosi rendelőbe történő szállításkor

A „Kis óriások” sorozat mosógépeivel és szárítógépeivel kapcsolatos további információt honlapunkon talál:
www.miele-professional.hu

Mosogatás

A Miele kifizetődő előnyei



Extra rövid programidők

Önnek is az extra rövid programidő és a ragyogó csillogás a legfontosabb? Akkor a Miele új ProfiLine mosogatógépei jelentik a tökéletes választást: a melegvíz és a három-fázisú váltóáram csatlakozások, az intelligens mosogatás és a nagyon erős fűtőszivattyú akár 17 perces, kiváló programlefutási időt és optimális tisztítási eredményt garantál. Élvezze a sok innovatív felszerelési jellemző előnyét, amelyek napról napra rendkívüli gyorsan ragyogóan tisztává varázsolják edényeit!



Hálózaton keresztül, kényelmesen

Szeretne időt megtakarítani, hogy csak a tényleg fontos dolgokra kelljen koncentrálnia? Nem probléma! Az ingyenes Miele alkalmazások*, a Miele@mobile vagy a mielepro@mobile segítségével bármikor, bárhol kapcsolatba léphet készülékével: kiválaszthatja a programot, lekérdezheti a hátralévő időt vagy ellenőrizheti a vegyszer szinteket.



A folyékony mosogatószer automatikus adagolása

A külső adagolómodullal a folyékony mosogatószer adagolása nagyon kényelmesen és mindig optimális adaggal történhet.



Alacsony fogyasztási értékek

Környezetbarát költségmegtakarítás: a ProfiLine mosogatógépek rendkívül alacsony fogyasztási értékeikkel és maximális hatékonyságukkal tűnnek ki. Már a termékfejlesztés során felállítjuk a mércét: az optimális mosogatási eredményeket újrahasonosítható anyagok bevonása és a szükségesnél nem nagyobb víz-, energia- és tisztítószersz-fogyasztás mellett kívánjuk elérni.



Nagyfokú tisztítási higiénia

A más-más személyek edényeit tartalmazó teakonyhákban a higiénia különösen nagy szerepet kap. Az új ProfiLine mosogatógépek a frissvízes mosogató rendszerükkel a magas tisztítási és utóöblítési hőmérsékletű „Higiénia” programban különösen jó tisztítási eredményt érnek el.



Perfect GlassCare¹⁾

A lágy víz előnyös, ha az edények tisztításról van szó, de túl agresszív a poharakhoz. A ProfiLine mosogatógépek emiatt a szabadalmaztatott Perfect GlassCare³⁾ technológiával rendelkeznek. Ez a technológia garantálja, hogy a mosogatóvíz mindig optimális keménységű legyen. Ezáltal gondoskodik üveg-poharai gyengéd tisztításáról – hogy hosszú ideig örömet lelje bennük.

Szerviz

Biztonságos működés és tartós értékmegőrzés

A Miele Professional kimagasló minőséget jelent – a szerviz terén is. Az ügyfélszolgálat teljes lefedettséget biztosító szerelői hálózata 24 órán belül képes eleget tenni a helyszínen történő javításoknak. A szállított anyagoknak köszönhetően már az ügyféllel való első találkozás alkalmával megoldható a szervizelési esetek mintegy 90%-a. A Miele üzemi ügyfélszolgálati évek óta páratlanul kimagasló szolgáltatásokat nyújtanak.



Teljes körű szerviz a kezdetektől

A Miele értékesítés már a készülék üzembe helyezésétől a fogorvos rendelkezésére áll részletes tanácsadási szolgáltatásával. Tapasztalt szakemberek segítenek az optimális készülék kiválasztásában, és annak mindenkorai igényekre szabásában. Kérésre átfogó gazdaságossági elemzést végeznek, és egyedi pénzügyi ajánlattal jelentkeznek.

A Miele számos karbantartást is kínál, amelyek végrehajtására a készülék életciklusának különböző időpontjaiban kerül sor. Speciálisan képzett technikusok vizsgálják a berendezés által végrehajtott folyamatokat a jogszabályok, a szabványok által előírt követelmények, valamint az adott országban érvényes javaslatok szerint.

Miele szervizelési szerződések	A készülékek teljesítményének minősítése
Megelőző karbantartás - Felügyelet - Karbantartás - Kopó alkatrészekkel együtt	A teljesítmény minősítése - Telepítés minősítése (IQ) - Funkció minősítése (OQ) - Teljesítmény minősítése (PQ)
Állagmegőrzési szerződés - Felügyelet - Karbantartás - Kopó alkatrészekkel együtt - Javítással együtt	A teljesítmény ismételt minősítése - A teljesítmény minősítése különleges ok nélkül - A teljesítmény minősítése különleges okból

Szerviz professzionális igényekre szabva

A Miele ipari ügyfélszolgálatának képzett szakemberei a készülék kiszállítása és üzembe helyezése során is támogatást nyújtanak, és kérésre különféle rutinellenőrzéseket hajtanak végre üzem közben. Így a készülékhibák már előzetesen elháríthatók, és az üzemi paraméterek folyamatosan optimalizálhatók. További előny: a készülék rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a befektetési érték megőrzésében.

- Minőségi szerviz orvosieszköz-technikusok átfogó hálózatával
- Rövid kiszállási idő és helyszíni javítások 24 órán belül
- A javítási esetek 90%-a már az első kiszállás alkalmával megoldódik
- Biztonságos pótalkatrész-szerviz a működés szempontjából fontos eredeti alkatrészekhez még 15 évvel a gyártás befejezése után is

Egyéni szervizszerződések és ellenőrzések

A Miele Professional az igényeknek megfelelő szervizszerződést köt a rendelőkkel. Az említett szerződések keretében a Miele üzemi ügyfélszolgálatának szakemberei rendszeresen ellenőrzik a készüléket. A kiválasztott szerződési modell szerint ez az elemzés minden fontos elem működésének és biztonságának elemzését, valamint az alkatrészek cseréjét foglalja magában. A turnusszerű karbantartással megelőzhető a meghibásodások, megnövelhető a készülék élettartama, és megőrizhető a beruházási érték. A Miele üzemi ügyfélszolgálatának ajánlata ezenkívül számos teljesítmény minősítésére és eljárás-ellenőrzésre is kiterjed, amelyeket a készülék életciklusának különböző időpontjaiban végre kell hajtani.

A „Profiline” sorozat mosogatógépeivel kapcsolatos további információt honlapunkon talál:
www.miele-professional.hu

¹⁾ Minimális követelmény: Android 4.2+/iOS 9+
³⁾ Európai szabadalom: EP 1 457 153 B

Szervizszolgáltatások

Szállítás

Kizárólag a Miele értékesítési és szállítási feltételei érvényesek.

Szállítás

Kérésre kiszállítás lehetséges a használat helyszínére. Az opció igénybevételének feltétele a készülék szabad földszinti elérhetősége, valamint az, hogy a készülék ne igényeljen szétszerelést. Készülék szerelése. Az elszámlolás a mindenkor érvényes beszállítási díj, illetve az idő- és egyéb ráfordítás alapján történik.

Csomagolás

Minden készülék szállításra kész csomagolásban van. A csomagolási díjat a készülék ára tartalmazza.

Szerelés

Opcionális ajánlat ellenében lehetséges a készülék szerelése. A gáz-, víz-, gőz- és elektromos csatlakozások, valamint a vízkivezetés mozgatása nem képezi a szolgáltatás részét. A szükséges csatlakozásokat a helyszínen a Miele érvényes szerelési tervei alapján, szerződött szakemberek által kell kialakítani, a vásárló költségére. Előfeltétele egy már behelyezett gép.

Üzembe helyezés

A gép első üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása az ipari vevőszolgálat vagy annak megbízottja útján történik, és a vételár tartalmazza.

Garancia

Ipari használatú gépeinkre, készülékeinkre és berendezéseinkre az üzembe helyezés napjától számítva 12 hónap időtartamú garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a kopóalkatrészekre és a nem szakszerű használatból eredő károkra.

Szervizszerződések

A költségvetés tervezésében a nagyobb biztonság érdekében köthet a rendelőjéhez igazított szervizszerződést.



Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele-professional.hu

Immer Besser

A Miele 1899 óta családi vállalkozásként működik, és egy világos irányelvet követ: Immer Besser. A márka alapját ez a mindenre kiterjedő igényesség jelenti, mely a „Made in Germany” jelentette minőség, fenntarthatóság és innováció alapját képezi. Ez az ígéret az, melyből a professzionális felhasználók tudhatják, hogy a megfelelő terméket választották.

Miele Professional az interneten

- Részletes információk a műszaki adatokról, a felszereltségről és a komponensekről
- Letölthető prospektusok minden termékcsoporthoz és alkalmazási területről
- Szemléletes ábrák, útmutatók és termékbemutatók a YouTube csatornán

Díjak

A termékek és szolgáltatások kompromisszumot nem ismerő megbízhatósága az oka annak, hogy a felhasználók újra és újra a Miele vállalatot a legjobb és a legmegbízhatóbb márkának választják. Az olyan neves díjak, mint az MX Award, az iF, a reddot Design Award, valamint a Deutscher Nachhaltigkeitspreis (német tartóssági díj) is jelzik a Miele kiemelkedő hozzáállását a designhoz, a minőségbiztosításhoz és az erőforrások kíméléséhez.

Szakértelem

A Miele Professional évtizedek óta a munkafolyamatok nagy részét házon belül tartva fejleszti és gyártja a kiváló minőségű mosógépeket, mosogatógépeket, tisztító- és fertőtlenítő berendezéseket, valamint sterilizátorokat. A gondosan összehangolt komponensek, az átfogó tanácsadás és a hatékony Miele ügyfélszolgálat biztosítja, hogy a készülékek mindig optimális teljesítménnyel és gazdaságosan üzemeljenek.